



洗える! ダイアフラム真空ポンプ
“令和初”お助けプライスカンペーン

キャンペーン期間
2019年12月末まで

ビューヒの頑強で簡単に洗える真空ポンプ
キャンペーン特価 **¥149,000~**



V-100

品番 11V100000

排気量:1.5 m³/h
到達真空度:**10**mbar(hPa)

キャンペーン価格
¥149,000

標準価格¥200,000



V-300

品番 11V300000

排気量:1.8 m³/h
到達真空度:**5**mbar(hPa)

キャンペーン価格
¥240,000

標準価格¥370,000



V-600

DMF、DMSOなどの
高沸点溶媒の蒸留に

品番 11V600000

排気量:3.1 m³/h
到達真空度:**1.5**mbar(hPa)

キャンペーン価格
¥430,000

標準価格¥660,000

おすすめ用途

①アスピレーター代わりに



②吸引濾過に



③デシケーターや真空乾燥機の真空源に



④油回転ポンプの代わりに



Q. ポンプを使って「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?

A. 多くはポンプ内部の汚れが原因です。



ビューヒの洗えるポンプなら

- わずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。

【ポンプ洗浄方法】



真空を引かなくなったら窓から内部の汚れを確認



洗浄



タオルなどをポンプ出口に当てて汚れの確認




タオルに汚れが付かなくなったら洗浄完了真空度回復!!

電磁弁を使用しない、絶妙な真空コントロール! インターフェイスセット(V-300/V-600シリーズのみ)

インターフェイスによるスピードコントロールの利点


ロータリーエバポレーター
や真空下での反応において、
サンプルに優しい真空制御
を提供します。

△ 電磁バルブによる制御

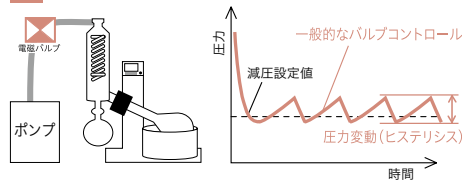

真空一定制御!!

● インターフェイスによるスピードコントロール

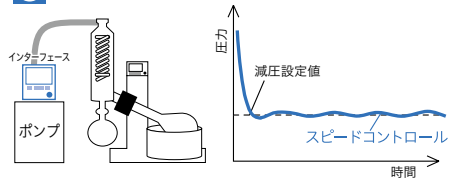

インターフェイスセット

インターフェイスコントローラーを搭載し、高精度の真空制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-302

品番 11V300200

キャンペーン価格
¥400,000

標準価格 ¥620,000



V-602

品番 11V600200

キャンペーン価格
¥600,000

標準価格 ¥890,000

インターフェイス溶媒回収セット

ポンプの出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、逃げる溶媒を凝集させ回収します。

インターフェイスコントローラーを搭載し、高精度の真空制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-303

品番 11V300210

キャンペーン価格
¥480,000

標準価格 ¥740,000



V-603

品番 11V600210

キャンペーン価格
¥680,000

標準価格 ¥1,020,000

高性能インターフェイスI-300Pro付きポンプシステムもキャンペーン中!! 働き方改革への第一歩!



V-302Pro




V-603Pro

セット名	品番	キャンペーン価格
V-302Pro	11V300300	¥500,000
V-303Pro	11V300310	¥580,000
V-602Pro	11V600300	¥700,000
V-603Pro	11V600310	¥780,000

圧カプログラムにより回収率改善! V-302Pro

I-300Proでは圧カプログラムの設定が可能

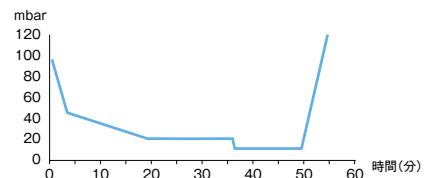

Quality in your hands

島津サイエンス東日本 株式会社

<https://www.sse-shimadzu.co.jp>

東京支店	TEL:03(6858)4740	本社(東京)	TEL:03(6858)4730
西東京支店	TEL:042(402)6161	柏支店	TEL:04(7132)2951
横浜支店	TEL:045(287)0700	つくば支店	TEL:029(852)0321
殿町LICサテライト	TEL:044(280)0350	埼玉支店	TEL:048(663)1781
藤沢支店	TEL:0466(99)0200	宇都宮支店	TEL:028(635)3077
千葉支店	TEL:043(382)3300	新潟支店	TEL:025(286)7191
市原支店	TEL:0436(79)0321	上越支店	TEL:025(545)5240
		MIC営業課	TEL:04(7128)5051

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17 IMONビル3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-6-16 新大阪大日ビル4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251
エリア担当者駐在: 九州エリア/中部エリア

nihon@buchicom | www.buchicom/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年8月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

