



ロータリーエバポレーター R-100 “令和初”お助けプライスカンペーン

キャンペーン期間
2019年12月末まで

R-100 (標準価格 ¥320,000) が
¥199,000
キャンペーン価格 **38% OFF**



ビュッヒはエバポレーターの生みの親です。世界初のエバポレーターが産声をあげたのは、1957年ドイツのアヘマでした。シンプル is ベスト! 変わらぬ良さを皆さまに!

高い安全性

プラスチックコーティング
ガラスの使用で安全・安心

万一の破損時でもガラス欠片が飛散しません。



高い安全性

フラスコの取り外しに木槌
不要でガラス破損のリスク
を低減

R-100ではフラスコ固定部品(コンビクリップ)を使って、長時間の減圧によって固着したフラスコも簡単に取り外せます。




蒸留時間短縮

高速回転で熱伝導効率を
高めて蒸留スピード UP

回転数により蒸留時間に以下のような差が生じます。
(水100mL、バス温度60°C)

280rpm	→	10分50秒
160rpm	→	19分12秒
80rpm	→	24分33秒

※当社テスト機での実測値
(設定真空度:72hPa(mbar))

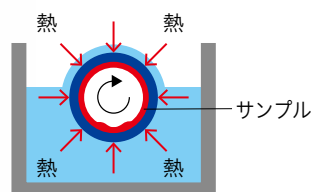

回転中の試料フラスコの断面図



ロータリーエバポレーター R-100

品名	品番	標準価格	キャンペーン価格
ロータリーエバポレーター単体 R-100			
標準ガラス	11100V102	¥320,000	▶ ¥199,000
プラスチックコーティングガラス	11100V112	¥340,000	▶ ¥209,000

裏面：ロータリーエバポレーター V-100 に最適な真空ポンプ V-100 へ

洗えるポンプ! ダイアフラム真空ポンプ V-100 “令和初” お助けプライスカンパーン

キャンペーン期間
2019年12月末まで

簡単洗浄! 簡単メンテナンスの洗える! ポンプがこの価格!

キャンペーン特価 **¥149,000~**



ラボでのさまざまな真空引き用途に



ダイアフラム真空ポンプ V-100

品番: 11V100000 標準価格: ¥200,000

キャンペーン価格 **¥149,000**

- 排気量1.5m³/h ● 到達真空度10hPa
- 低振動でとても静か
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし
- 分解せずに内部洗浄可能

《おすすめ用途》

① アスピレーターの代わりに



② デシケーター
や真空乾燥機
の真空源に



③ 真空乾燥機の減圧に



真空度を微妙に制御する用途に



インターフェイスセット V-102

品番: 11V100110 標準価格: ¥380,000

キャンペーン価格 **¥301,000**

- エバポレーターの真空源に最適!
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

《おすすめ用途》

① 吸引濾過に



② エバポレーターの真空源に



真空度を微妙に制御しつつ溶媒回収も行う用途に



インターフェイス溶媒回収セット V-103

品番: 11V100111 標準価格: ¥500,000

キャンペーン価格 **¥390,000**

- ポンプ出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、排気中の溶媒を凝集させ回収
- ポンプの内部の洗浄を受けフラスコでトラップ
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

《おすすめ用途》

エバポレーターの真空源に



Q. ポンプを使って「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?

A. 多くは
ポンプ内部の
汚れが原因です。



ビュッヒの 洗えるポンプなら

- わずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。

【ポンプ洗浄方法】



真空を引かなくなったら窓から内部の汚れを確認



洗浄



タオルなどをポンプ出口に当てて汚れの確認



タオルに汚れが付かなくなったら洗浄完了真空度回復!!

Quality in your hands

島津サイエンス東日本 株式会社

<https://www.sse-shimadzu.co.jp>

本社(東京)

TEL: 03(6858)4730

東京支店 TEL: 03(6858)4740

西東京支店 TEL: 042(402)6161

横浜支店 TEL: 045(287)0700

殿町LICサテライト TEL: 044(280)0350

藤沢支店 TEL: 0466(99)0200

千葉支店 TEL: 043(382)3300

市原支店 TEL: 0436(79)0321

柏支店

つくば支店

埼玉支店

宇都宮支店

新潟支店

上越支店

MIC営業課

TEL: 04(7132)2951

TEL: 029(852)0321

TEL: 048(663)1781

TEL: 028(635)3077

TEL: 025(286)7191

TEL: 025(545)5240

TEL: 04(7128)5051

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F

TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F

TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251

エリア担当者在: 九州エリア/中部エリア

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年8月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

